

Массажер перкуссионный универсальный с подогревом Naipo MGPC-5000

Инструкция по эксплуатации:




Благодарим вас за покупку массажера Naipo с вибрацией и нагревом. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраните его в надежном месте для дальнейшего использования.

Технические характеристики:

Форм-фактор: ручной массажёр
Материал корпуса: пластик
Эргономичный дизайн
Вид массажа: перкуссионный (постукивание)
Тип массажера: универсальный
6 насадок: 3 силиконовые и 3 пластиковые
3 вида насадок (по 2 шт.): круглая, точечная, зубчатая
Регулируемая скорость: до 3800 об./мин
Инфракрасный подогрев
Управление: колесико-скролл и кнопка
Питание: от сети 220-240В
Размеры: 420 x 90 x 90 мм
Вес: 1000 г

Внешний вид:

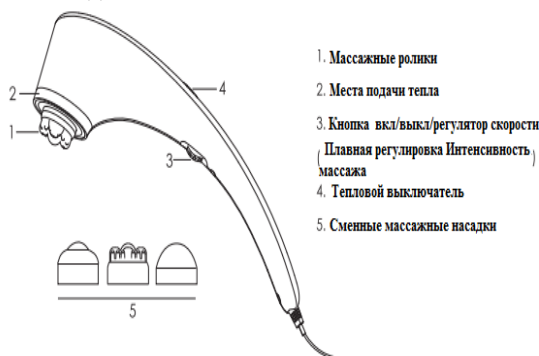

Начало работы:

- Снимите упаковку.
- Проверьте на повреждение устройства, источника питания и кабелей.
- Подключите устройство к электросети. Устройство должно быть выключено.
- Проложите кабель безопасно, чтобы никто не мог повредить его.

Тип перкуссионного массажа (постукиванием). Насадки сменные: в комплекте 3 пластиковые и 3 силиконовые насадки для разных видов массажа.

Управление простое: скролл и кнопка.

Колесико-скролл. На ручке внутренней стороны находится колесико, которое включает/выключает массажер, а также отвечает за выбор скорости массажа. Диапазон скоростей широкий – выбирайте на свой вкус.

Кнопка Heat. Включает/отключает инфракрасный подогрев. Он дополнительно расслабляет мышцы и усиливает эффект от массажа.

ПеркуSSIONный массаж глубоко проникает в ткани, устраняет боли и стимулирует восстановление мышц после физических нагрузок. В комплекте 6 насадок: 3 пластиковые (более жесткие) и 3 силиконовые (помягче).

1. Круглая насадка – для мягкого массажа, подходит для любых частей тела.



2. Точечная насадка – для воздействия на биологически важные точки, имитирует массаж Шиацу. Такой массаж способствует расслаблению и гармонизирует душевное состояние. Перед применением рекомендуем изучить расположение акупунктурных точек на теле.



3. Зубчатая насадка – для интенсивного массажа больших зон: спины, поясницы, ягодиц, ног. Способствует сжиганию жировых отложений и дает антицеллюлитный эффект.



Привыкайте к массажу постепенно. Для начала достаточно одного сеанса в день по 10-15 минут. Если ваша проблема – переутомление и головные боли, рекомендуем этим и ограничиться.

Меры предосторожности:

Чтобы массаж принес только пользу, не используйте массажер при наличии противопоказаний.

Серьезные сердечно-сосудистые заболевания и повышенное артериальное давление.

Онкологические заболевания.

Травмы позвоночника и остеопороз.

Кожные заболевания (экзема, псориаз) - не следует массировать в пораженной области.

Варикозное расширение вен.

Обострение хронических заболеваний и наличие воспалительных процессов в организме.

Период беременности.

Уход за изделиями:

1. Перед чисткой отсоедините устройство.

2. Очищайте прибор только в указанном порядке.

3. Не используйте устройство снова до полного высыхания.

Гарантия и поддержка клиентов:

По вопросам, вопросам поддержки, поддержки или гарантийных претензий, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанному ниже адресу, который соответствует вашему региону.

Производитель: Shenzhen Naipo Technology Co. Ltd, No.102, Building P09, Huanan Town, Pinghu, Longgangqu, Shenzhen, Guangdong, China (Китай)

Поставщик в РБ : ООО «Форевер-Мобил» г.Минск ул. Кульман 9 пом.17

Гарантия 12 месяцев с момента покупки.

Срок службы 24 месяца.

Сервисный центр: ООО «Портатив Мобайл Сервис» г.Минск Кульман9,

Торговый центр «Монетка», сектор 5, место 10

8 029 366-33-22 (Velcom),

8 033 366-33-22 (МТС)

Понедельник - выходной.

Все остальные дни с 10 00 до 19 00 без обедов.

ЕАС - Устройство соответствует требованиям техническому регламенту -Таможенного Союза.